



AESTHETICS



**BTL** EXILITE™

# BTL EXILITE

## RISULTATI SENZA COMPROMESSI



[info@btl.aesthetics.italia.com](mailto:info@btl.aesthetics.italia.com)  
[www.btl.aesthetics.com](http://www.btl.aesthetics.com)

Tutti i diritti sono riservati. Sebbene sia stata utilizzata la massima attenzione nel fornire informazioni accurate ed aggiornate, nessuna responsabilità può essere imputata per eventuali errori o difetti di stampa contenuti in questo catalogo. I prodotti e le loro specifiche tecniche, come mostrati nel catalogo, possono essere modificati senza alcuna comunicazione.

# L'ESSENZA DELLA **PERFEZIONE**

BTL EXILITE È UN ESCLUSIVO SISTEMA DI LUCE PULSATA INTENSA CHE FORNISCE RISULTATI INCOMPARABILI ED ECCELLENTI. QUESTA INNOVATIVA TECNOLOGIA CONSENTE TRATTAMENTI VELOCI E CONFORTEVOLI.



# ESCLUSIVA PERFORMANCE



## DURATA **SUPERIORE**

Exilite offre una lunga durata della lampada. Il Ritorno degli Investimenti è massimizzato grazie alla riduzione dei costi.

## POTENZA **SUPERIORE**

Gli eccellenti risultati clinici sono assicurati dall'alta potenza. La fluenza di BTL Exilite raggiunge i 40 J/cm<sup>2</sup>.

## **ALTO** TASSO DI RIPETIZIONE

Tempi di terapia più veloci a beneficio sia dei pazienti che dell'operatore. L'operatore può impostare la frequenza degli impulsi fino a 3 Hz in modo da trattare anche grandi superfici come la schiena in meno di 20 minuti.

## RAFFREDDAMENTO **TERMoeLETRICO** DELLO SPOT IN ZAFFIRO


Grazie allo spot in zaffiro, l'avanzato sistema di raffreddamento rende la terapia delicata sulla pelle.

## FILTRI **ACCURATI** E SEMPLICI DA CAMBIARE

Il cambio dei filtri nel manipolo universale IPL Exilite è semplice e veloce. Il sistema è pronto per un'altra indicazione in pochi secondi.




# SFRUTTA AL MASSIMO I VANTAGGI DELLA VERSATILITA'

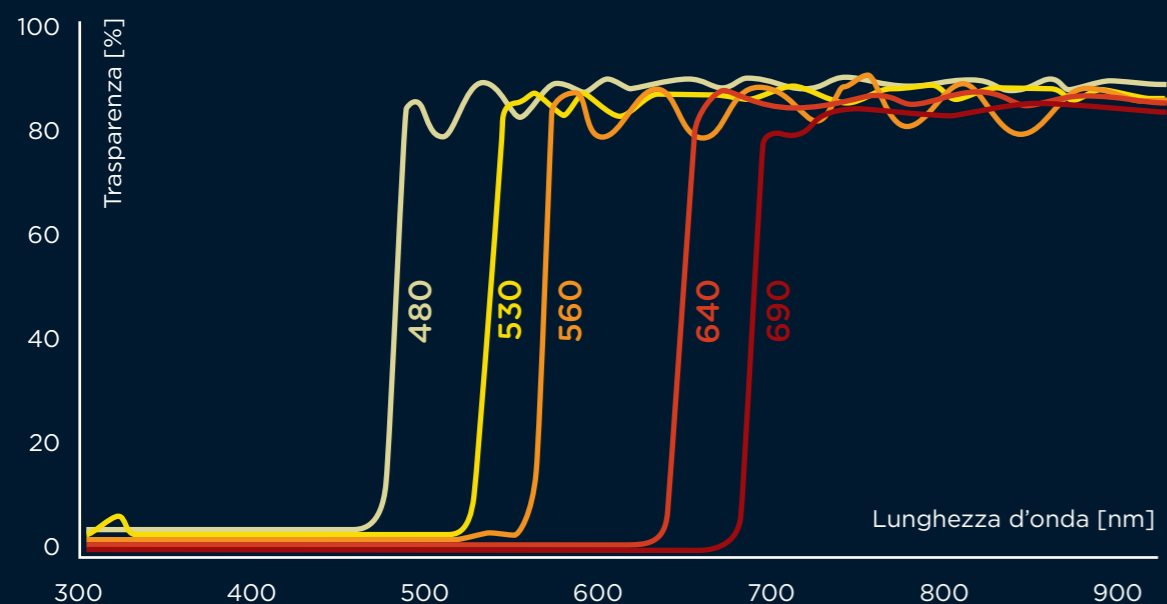


## DISTRIBUZIONE UNIFORME DELLA LUCE

Le placche in oro riflettono l'energia dispersa in modo da distribuirla uniformemente ed accuratamente su tutto lo spot. Questa caratteristica è fondamentale per ottenere risultati ottimali ed incomparabili.

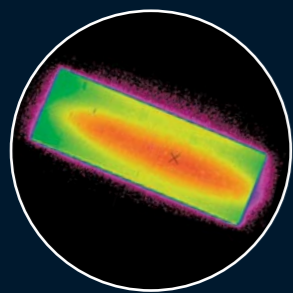


Distribuzione di energia dei comuni sistemi IPL

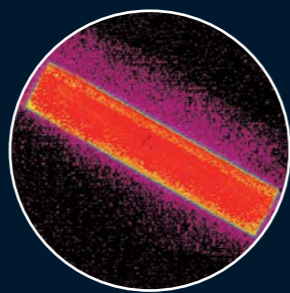


Distribuzione di energia del sistema Exilite IPL

I **FILTRI AD ALTA PRECISIONE** DETERMINANO LO SPETTRO DI LUCE NECESSARIA PER TRATTARE UNA VASTA GAMMA DI INDICAZIONI ESTETICHE.

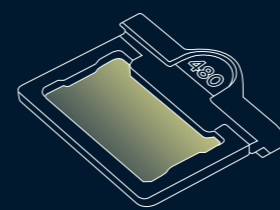


Filtro  
**480 nm**

Riduzione  
dell'acne

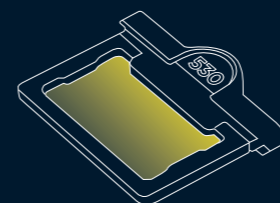


Filtro  
**530 nm**

Trattamento della  
pigmentazione

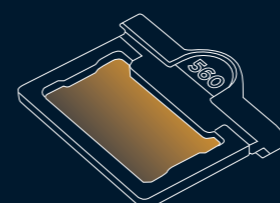


Filtro  
**560 nm**

Lesioni vascolari  
Trattamenti  
di ringiovanimento  
della pelle

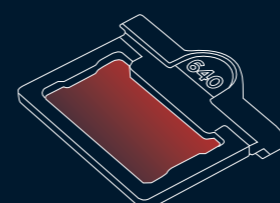

Filtro  
**640 nm**


Epilazione  
Fototipo I-III

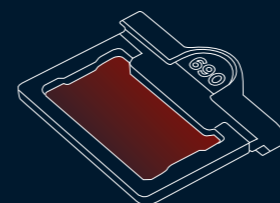

Filtro  
**690 nm**

Epilazione  
Fototipo IV-V

# POTENZA ELEVATA EROGATA CON ACCURATEZZA

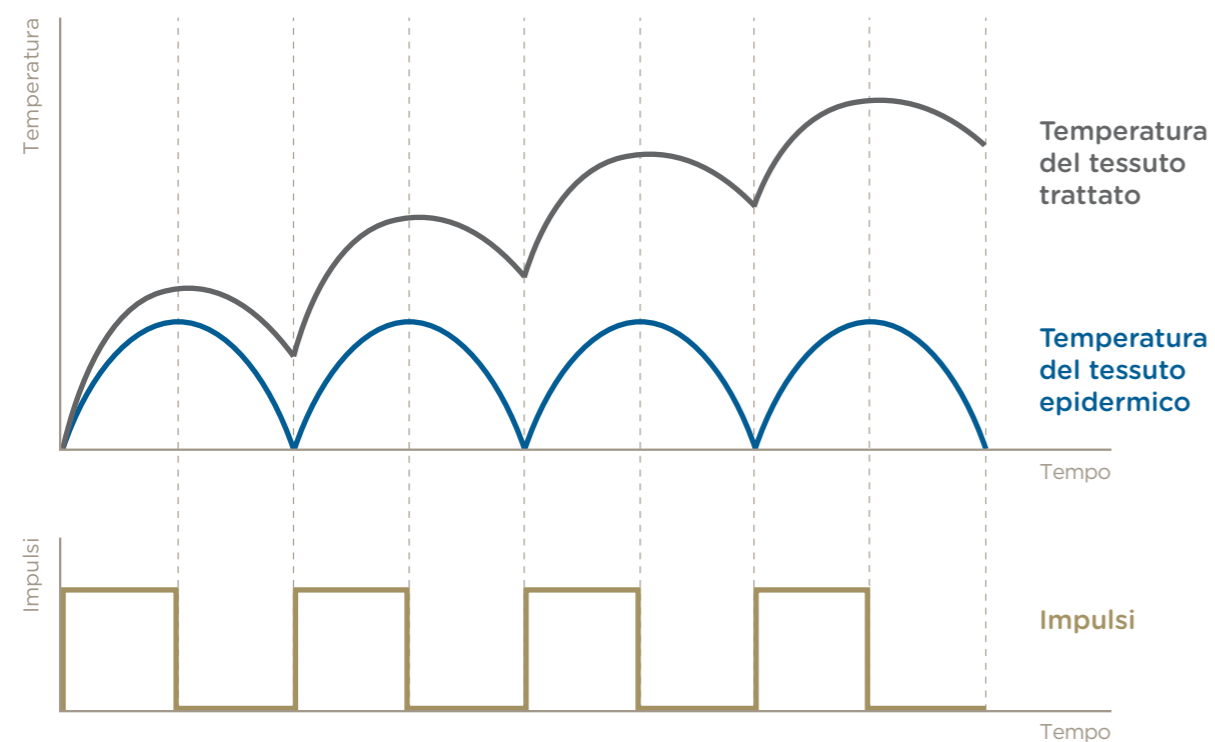

## MODALITÀ MULTI IMPULSO INTELLIGENTE

La modalità Multi Impulso di BTL Exilite consente una trasmissione di energia estremamente delicata sulla pelle, avendo così ottimi effetti anche su pazienti con minor differenza di pigmentazione del tessuto trattato. La modalità Multi Impulso aumenta l'effetto della terapia, diminuendo il rischio di controindicazioni come il rossore.

# RISULTATI VISIBILI E DURATURI



# POSTLIGHT™



BTL Exilite offre un eccellente miglioramento del processo di rigenerazione sfruttando l'effetto non-termico della tecnologia a luce modulata LED.

Questo metodo scientificamente provato riduce sostanzialmente l'eritema ed aumenta il processo di rigenerazione della pelle stimolando positivamente la produzione di collagene nel tessuto.



# IL PROGRESSO NON SI FERMA MAI

FLUENZA FINO A **40 J/CM<sup>2</sup>**

TASSO DI RIPETIZIONE FINO A **2 HZ**

RAFFREDDAMENTO **TERMOELETTICO**

LUNGHEZZA IMPULSO FINO A **250 MS**

FUNZIONAMENTO CON UN UNICO  
MANIPOLO

FILTRI **480, 530, 560, 640, 690 NM**

SPOT IN ZAFFIRO **11 MM × 40 MM**





